

PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK:

ügyfélszolgálat: 06-20-229 3690

Alkalmazási területek

Fájdalomcsillapítás a transzcután (bőrön keresztül történő) idegstimulációval
Elektromasszázs
Izomlazítás, izomláz oldása
Iontoforézis
Szelektív izomkezelések
Elektroakupunktúra

A készülékkel szállított tartozékok:

1 db készülék, 2 pár elektróda, 2 db kábel, 2 pár csatlakozófej, 1 db 9V elem, 1 pár rögzítő szalag, 1 db használati utasítás

Vásárolható kiegészítők:

öntapadó rögzítőcsík, öntapadó-, gumi-, inkontinencia-, és tartós fémelektrodák

Üzembehelyezés és alkalmazás:

ELLENŐRIZZE, HOGY MINDKÉT FORGÓGOMB KIKAPCSOLT ÁLLÁSBAN VAN-E! Csak ezután csúsztassa le a készülék elülső felén található bordás fedelet, majd csatlakoztassa a 9V-os elemet az ott látható rajz szerint.

Csatlakoztassa a piros-fekete kábelek „L” alakú végeit a készülék tetején lévő lámpák melletti bemeneti lyukakba. Rögzítse a piros-fekete kábelek kerek végeit az elektródákhoz

FEKETE GUMIELEKTRODA esetén:

a fekete gumilap-elektrodák lapos fele néz majd a kezelendő bőrfelület felé.

A gumilap alá köztianyagot, azaz:

- kis nedves gézdarabot, vagy
- a segédeszköz boltokban kapható ultrahang zselét, vagy
- Diclofenac, Voltaren tartalmú kenőcsöt kell tenni a megfelelő áramvezetés érdekében

Helyezze a bőrére a gumilapot, alatta a „köztianyaggal” és rögzítse a kék tépőzáras csíkkal

ÖNTAPADÓ ELEKTRODA esetén (célszerű előzetesen szappanos vízzel, vagy sebbenzinnel zsírtalanítani a kezelendő bőrfelületet az elektródák élettartamának növelése érdekében) simítsa a kezelendő testfelületre az öntapadó elektródákat.

Válassza ki a használni kívánt a programot a 9V-os elem mellett található:

M,N,B

gombok oldal irányú elmozdításával az alábbiak szerint

M Frekvenciahinta, négyszög impulzus. Impulzus hossz: 0,2 ms

izmok kíméletes kezelése, izomláz oldás, masszáz, izomcsomók oldása, decubitusok környéki kezelése, stressz oldás, helyi bővérűség keltése, közepes fájdalomcsillapító hatás

A Pulse Width gombot izomkezelésnél célszerű a maximum értékre csavarni, a többi felhasználáskor nincs jelentősége, de tetszés szerint állítható a kívánt legkellemesebb áramérzet érdekében.

N fájdalomcsillapítás, inkontinencia (vizelet-, széklet vagy gáz visszatartási zavarok)

A PULSE RATE gombbal változtatható frekvenciájú TENS impulzusok, Frekvencia tartomány 1 - 100Hz. Folyamatos, szünet nélküli üzemmód.

A PULSE WIDTH gombban változtatható az impulzus hossza (a beállítás változtatásának jelentősége ebben a méret tartományban a fájdalomcsillapítás és izomkezelések esetén elhanyagolható, javasoltan 250 microsec)

Pulse Width gomb beállításának nincs jelentősége, esetleg a kívánt legkellemesebb áramérzet megtalálása miatt javasoljuk beállítani.

JAVASLAT FREKVENCIABEÁLLÍTÁSOKHOZ:

- akut fájdalom kezelése	80-100 Hz
- krónikus fájdalom	2 Hz
- akupunktúra pontok	2 Hz
- inkontinencia stressz	60 Hz
- inkontinencia „urge”	10 Hz

B izomerősítés, ép idegvezetésű vagy egyes részlegesen idegsérült izmok kezelése

Krónikus fájdalom csillapítása,

gyermekek kíméletes fájdalomcsillapító kezelése

inkontinencia kevert típus kezelése. Kezelési idő max. 15 perc, fokozatosan érjük el, naponta legalább 2 alkalommal.

Idítsa a kezelést a készülék tetején található számozott forgógombokkal, majd óvatosan emelje az áram erősségét a gomb lassú továbbforgatásával.

ÉLVEZZE A KEZELÉST! KEZELÉS UTÁN LEGALÁBB 15 PERCET PIHENJEN! Kezelés végén kattanásig csavarja le a forgógombokat csak EZUTÁN vegye le az elektródákat!

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK!

- A GÉP MŰKÖDÉSE KÖZBEN NE KAPCSOLJA ÁT A „M-N-B” GOMBOKAT!
- Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a kábel nem sérült vagy szakadt. Fém tárgy vagy fémprotézis ne kerüljön az elektródák közé, az áram útjába! Mobiltelefon használata közben kezelést ne végezzünk! Pacemakerrel rendelkezők kérjék ki orvosuk véleményét! Lázas állapot, daganatos megbetegedések esetén kérje kezelőorvosa véleményét! Nyílt sebre vagy beteg bőrfelületre ne tegye az elektródát! Kezelés közben időnként ellenőrizze a bőrfelületet. Ha erősen kipirult, folytassuk a kezelést a szomszédos bőrfelületen!

Lehetséges hibák és elhárításuk: PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat: 06-20-2293 690

A téves beállításból, vagy elektróda-kábel hibából adódó felesleges visszapostázás elkerülése érdekében kérjük telefonáljon!

HA kezelés közben nem érez semmit:

- | | | |
|------|---|---------------------------------------|
| oka: | - gumielektroda előregedett | - ki kell cserélni |
| | - szakadt pacienselektroda | - ki kell cserélni |
| | - idegsérült területen kezel | (természetes érzetkiesés) |
| | - nincs megfelelően csatlakoztatva valamelyik elektróda | - ellenőrizze a helyes kontaktusokat! |

HA a lámpa nem világít: -nincs az elem a készülékhez csatlakoztatva, vagy kimerült -Cserélje újra és csatlakoztassa!

A készüléket forgalmazza: TENSOL Kft Balatonfüzfő, Munkás tér 3 T/F :88-598 308, 450 702 Mobil 20-2293690 **Garanciaidő:** a készülékre: 1 év

KEZELÉSI JAVASLATOK

Bőrünk vezetőképessége miatt kezelés közben többször módosíthatjuk az áram erősségét. forgógomb)



Az intenzitást ne állítsuk túl erősre! Mindig kellemes maradjon a kezelés. A több áram nem használ.

VÉGTAG FÁJDALMAK: Ugyanazon felhelyezés alkalmazható az ép oldali végtagon vagy ízületen, mint a fájdalmas oldalon. kétoldali kezeléssel, így erősíthető a fájdalomcsillapító hatás

NYAK-, HÁT-, DERÉK-FÁJDALMAK:

a gerincoszlop két oldalán lazító kezeléssel

gerincoszlop két oldalán „kereszt felhelyezéssel a fájdalmas területet közrefogva az azonos színű elektródavégek átlósan helyezkednek el: 4-es vezeték szükséges (mely nem tartozéka a készüléknek, külön rendelhető)

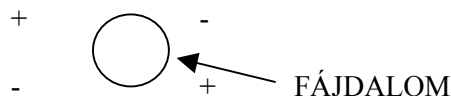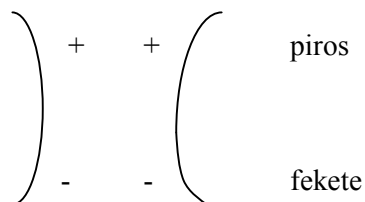

KISUGÁRZÓ FÁJDALMAK:

A fájdalom helyén és a kisugárzás mentén:

FEJFÁJÁS:

Kezelhetünk magas 80-100 Hz frekvencián óvatosan állítva be az áramerősséget.


Elektródák a homlokrészen a szemöldökök belső vége fölé.

Kiegészítő kezelésként a tarkó alá a nyakra vagy vállakra helyezhető a másik elektródapár.

A nyak-tarkó vonalra kétoldalt, a másik elektródapár pedig a kézfej két akupunktúra pontjára:

hüvelyk-mutató ujj közti párnára a kéz hátán

kisujj meghosszabbított vonalában a csukló elé a kézfej külső élére

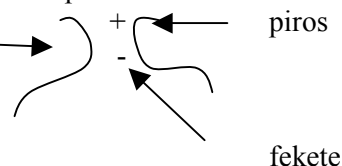

IZOMERŐSÍTÉS

kék (-) elektródavég kerül fölfelé, azaz a fej felé (az izom eredés helyére)

a fehér (+) elektródavég pedig lefelé, azaz a láb felé (ill. az izom tapadásra)